


MAGNER LT

MagnerLT jest jednokanałowym aparatem służącym do wykonywania zabiegów magnetoterapii. Pole magnetyczne generowane jest w aplikatorach szpulowych o trzech różnych średnicach. Największy aplikator montowany jest do aluminiowej kozetki na łożyskowanym wózku. Użytkownik może korzystać z banku wbudowanych programów lub ustawić wszystkie parametry samodzielnie. Można również definiować i zapisywać w pamięci sterownika własne programy zabiegowe.

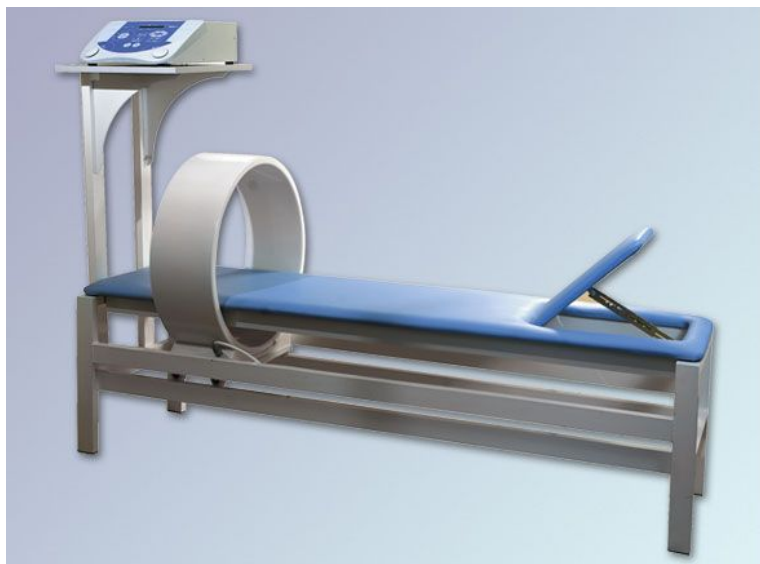

Aparat może współpracować wyłącznie z aplikatorami z niskoprądowej serii LT. Konstrukcja sterownika pozwala na jednoczesną emisję pola magnetycznego w dwóch dowolnie wybranych aplikatorach z zachowaniem parametrów i czasu zabiegu.

W tym trybie indukcja pola magnetycznego w obu aplikatorach jest ściśle zależna od ich wielkości i rodzaju.

POLE MAGNETYCZNE

- typy pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprostokąt
- tryb mieszany: różne rodzaje pola w jednej sesji zabiegowej
- emisja ciągła i modulowana
- duża indukcja pola magnetycznego
- szeroki zakres częstotliwości

AKCESORIA

- aplikatory szpulowe o średnicach 20, 35, 60cm serii LT (niskoprądowe)
- leżanka do magnetoterapii do aplikatora 60cm
- półka pod aparaty do magnetoterapii mocowana do leżanki
- stolik pod aplikatory pola magnetycznego

PROGRAMY ZABIEGOWE

- uproszczenie obsługi aparatu
- jednostki chorobowe wybierane wg nazwy
- 46 jednostek chorobowych
- 79 programów zabiegowych
- 50 programów do ustawienia dla użytkownika

ERGONOMIA

- tryby pracy: programowy/manualny
- wyświetlacz znakowy – czytelna obsługa
- wybór jednostek chorobowych po nazwie
- zegar zabiegowy
- cztery uniwersalne gniazda aplikatorów
- automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora

PARAMETRY TECHNICZNE

Maksymalna indukcja: 0-10mT/100Gs
Parametry trybu modulowanego: impuls 1s/ przerwa 0,5-8s
Zakres częstotliwości: 2-60Hz
Zegar zabiegowy: 1-30min
Zasilanie: 230V, 50Hz, 580W
Wymiary sterownika: 35x45x13,5cm
Masa sterownika: 13kg

GWARANCJA

Magner LT, akcesoria 2 lata

TRYB MANUALNY

- pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników

KONSTRUKCJA

- mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu
- ciekłokrystaliczny wyświetlacz znakowy
- trwała i niezawodna klawiatura

